


EFFIDIA[®]

CRÈME

SEL SODIQUE D'ACIDE HYALURONIQUE
CRÈME EN TUBE DE 100 g À USAGE CUTANÉ



Acelity™

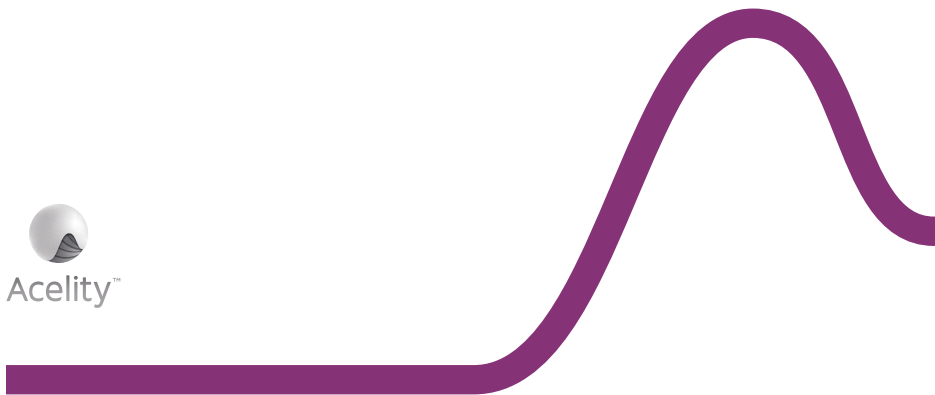

REF 7799870

FR Description du produit

EFFIDIA® crème est une préparation réservée à une utilisation locale, dont le composant principal est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est un polysaccharide biologique (glycosaminoglycane), qui est distribué dans la matrice extracellulaire de la plupart des tissus. Grâce à ses propriétés hydrophiles, il assure l'hydratation de l'espace autour et entre les cellules, ce qui facilite leur migration. EFFIDIA® est disponible sous plusieurs formes (EFFIDIA® crème, compresse de gaze, spray et gel).

Composition

Composant principal : sel sodique d'acide hyaluronique à 0,2 %.
Autres composants : monostéarate de polyéthylène glycol 400, décylester d'acide oléique, cire émulsifiante, glycérol, solution de sorbitol à 70 %, déhydroacétate de sodium, p hydroxybenzoate de méthyle, p hydroxybenzoate de propyle, parfum, eau purifiée.

Indications

EFFIDIA® crème est indiqué dans le traitement des irritations et des lésions cutanées. La crème est principalement utilisée pour recouvrir les plaies aiguës et chroniques (écorchures, zones de greffe de peau et coupures postopératoires, brûlures du premier et deuxième degré, ulcères vasculaires et métaboliques et escarres) et pour maintenir un environnement humide de la plaie, afin de la protéger du frottement, de la friction et du dessèchement.

Posologie et mode d'administration

Les plaies ou ulcères doivent être nettoyés et désinfectés avant le traitement. Appliquer une fine couche de crème sur la surface de la plaie, deux fois par jour ou plus. Recouvrir ensuite la surface traitée d'une compresse de gaze stérile et d'un pansement stérile.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité connue aux composants du produit.

Mises en garde et précautions d'emploi

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
La date de péremption indiquée sous-entend que le produit a été conservé dans son emballage d'origine à une température inférieure à 30 °C.
A utiliser dans les 12 mois qui suivent la première ouverture.
Éviter tout contact direct de l'emballage avec la plaie.
Afin de limiter au minimum le risque d'infection croisée, chaque tube de EFFIDIA® crème ne doit être utilisé que par un seul patient.
Éliminer après utilisation, conformément à la législation nationale en vigueur.
Tenir hors de la portée des enfants.

Effets indésirables

Les effets indésirables locaux suivants peuvent se produire occasionnellement : éruption cutanée sur le site d'application, démangeaisons, sensation de brûlure, irritation de la peau,

sécheresse de la peau, érythème, dermatite, décoloration de la peau. Les symptômes sont généralement temporaires et légers et nécessitent rarement l'arrêt prématuré du traitement.

Interactions

Ne pas utiliser simultanément avec des désinfectants contenant des sels d'ammonium quaternaires en raison du risque de précipitation de l'acide hyaluronique en présence de ces composés. Un traitement local des plaies concomitant par des antibiotiques ou d'autres produits locaux n'a jamais entraîné d'interaction ni d'incompatibilité avec EFFIDIA® crème.

Conservation

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

Mode de délivrance

Boîte en carton contenant un tube de 15 g.
Boîte en carton contenant un tube de 25 g.
Boîte en carton contenant un tube de 30 g.
Boîte en carton contenant un tube de 100 g.

SYMBOLES UTILISES SUR L'EMBALLAGE



= Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.



= Durée d'utilisation après ouverture.



= Code du lot.



= Utiliser jusqu'au.



= Marquage CE et n° d'identification de l'organisme notifié.



= Consulter la notice d'utilisation.



= Limite supérieure de température.



= Référence du catalogue.



= Fabricant.

Date de dernière mise à jour des instructions d'utilisation : avril 2016

Distribué par :
©2017 Systagenix Wound Management Limited,
Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX, UK

Systagenix
An Acelity Company

FIDIA Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padua) Italie
® Marque enregistrée

fidia
farmaceutici



610321/E